


Selbstanleitung zur Behebung von Problemen mit dem CGM PRAXISTIMER aufgrund des MS Defender

An allen Rechnern, an denen der Windows Defender aktiv ist, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:


Bitte starten Sie das Windows Defender Security Center über das Minisymbol in der Taskleiste . Dort öffnen Sie den



Danach bitte auf "Einstellungen verwalten"



Dort müssen die Ausschlüsse definiert werden:

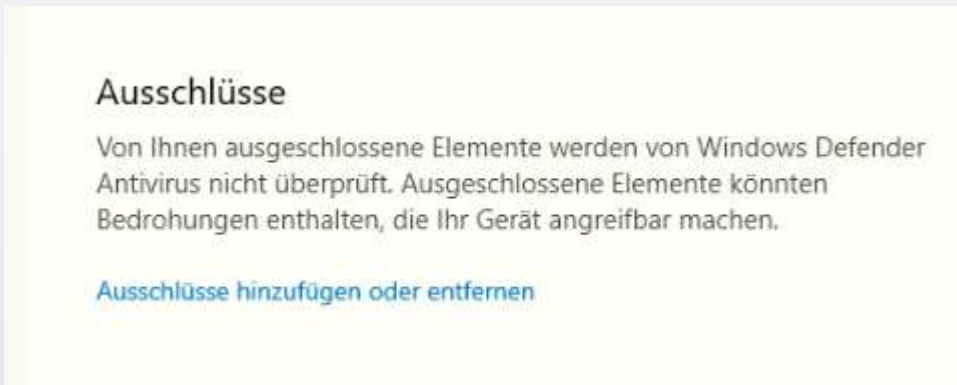

Hier bitte einmal das Verzeichnis des CGM PraxisTimers \\Servername\timer (Auswahl Ordner) und die timer.exe (Auswahl Prozesse) explizit als Ausnahme setzen.



Im Anschluss gehen Sie auf "Aktuelle Bedrohungen" und "Schutzverlauf" um dort die Datei wiederherzustellen.



Dies muss an allen Rechnern durchgeführt werden, an denen der Windows Defender aktiv ist.

Danach kann/muss die timer.exe am Server in das CGM PraxisTimer Verzeichnis einkopiert werden. Hierzu müssen ggf. jegliche Zugriffe durch Clients auf dieses Verzeichnis beendet werden. (Am Server -> Computerverwaltung -> geöffnete Dateien)

Die Timer.exe können Sie über folgenden Link herunterladen:

<https://files.cgm.com/index.php/s/4DG6wWHWxxH1nhx>

Kennwort: #Update1